

COLSON®

Gamme tensiomètres



- **Technicité**
- **Sécurité**
- **Simplicité**

CE 0120

Plus d'informations sur :
More informations on:



Tensiomètre électronique poignet

BK150



Conforme au
protocole AAMI



Garantie 5 ans

Inclus : piles, brassard, mode d'emploi, boîtier de transport



Technologie Smart Sense :
Ajustement électronique de la déflation,
pour une précision accrue



Ultra simple : utilisation sur une seule
touche



IHB :
détecteur d'arythmie cardiaque



7 mémoires



Indicateur de risque d'hypertension

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Méthode de mesure Oscillométrique / Plage de mesure	Pression: 40~250 mmHg ; pouls : 40~199 batt./minute
Précision	Pression: ± 3 mmHg Pouls: ± 5 % de la lecture
Capacité de stockage	7 mémoires
Arrêt automatique	1 minute après la dernière pression de touche
Source d'alimentation	DC 3 V, deux piles AAA de 1.5 V (fournies)
Dimensions	82(L) x 69(l) x 66(H) mm
Poids	120g (sans piles)
Taille du brassard	tour de poignet 13,5~22 cm
Conforme aux normes	EN 1060-3+A2 : 2010 / EN 1060-4: 2004

Tensiomètre électronique brassard

CH155f



Conforme aux
protocoles ESH
et AAMI



Garantie 5 ans




Brassard cône
universel

Inclus : piles, brassard, mode d'emploi, housse de transport



Real Fuzzy Technology :
niveau de gonflage/dégonflage adapté à
chaque mesure

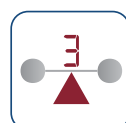

Moyenne des 3 dernières mesures



IHB :
détecteur d'arythmie cardiaque



Détecteur de mouvement



Indicateur de risque d'hypertension



90 mémoires

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Méthode de mesure Oscillométrique / Plage de mesure	Pression: 30-260 mmHg; pouls: 40~199 batt./minute
Précision	Pression: ± 3 mmHg Pouls: ± 5 % de la lecture
Capacité de stockage	90 mémoires
Arrêt automatique	1 minute après la dernière pression de touche
Source d'alimentation	Quatre piles CC (AAA) fournies
Dimensions	124 (L) X 85 (l) X 68.6 (H) mm
Poids	345 g (sans piles)
Taille du brassard	tour de bras 24~40 cm
Conforme aux normes	EN 1060-3+A2 : 2010 / EN 1060-4: 2004

Tensiomètre électronique brassard

MJ701f



Conforme au
protocole ESH



Validation
clinique



Garantie 5 ans

Service
de calibration
à vie *



Brassard cône
universel

Inclus : piles, brassard, mode d'emploi, trousse de transport



Real Fuzzy Technology :

niveau de gonflage/dégonflage adapté à
chaque mesure




IHB :

détecteur d'arythmie cardiaque



Indicateur de risque d'hypertension

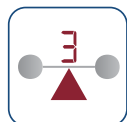

Moyenne des 3 dernières mesures



Détecteur de mouvement



120 mémoires. 2 utilisateurs
avec date et heure



Mode invité : 2 zones de mémoire

* Selon tarif catalogue en vigueur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Méthode de mesure Oscillométrique / Plage de mesure	Pression: 30-260 mmHg; pouls: 40~199 batt./minute
Précision	Pression: ± 3 mmHg Pouls: ± 5 % de la lecture
Capacité de stockage	60 mémoires pour chacune des 2 zones
Arrêt automatique	1 minute après la dernière pression de touche
Source d'alimentation	Quatre piles CC (AA) fournies
Dimensions	155 (L) X 110 (l) X 75 (H) mm
Poids	430 g (sans piles)
Taille du brassard	tour de bras 24~40 cm
Conforme aux normes	EN 1060-3+A2 : 2010 / EN 1060-4: 2004

Tensiomètre électronique brassard **PROFESSIONNEL**

AC1000f

Permet de mesurer de multiples paramètres et bénéficie de nombreux réglages



Conforme au protocole ESH



Validation clinique



Garantie 2 ans

Service de calibration à vie *



Fonctionne sur batterie et adaptateur secteur fournis



3 brassards fournis (S/M/L)



Mesure automatique et auscultatoire



Réglage du taux de dégonflage



Capot anti éclaboussures



Technologie PARR (détection de l'arythmie cardiaque)



Détection de la fibrillation auriculaire



Détection des contractions prématurées



Détection de la tachycardie



Détection de la bradycardie

* Selon tarif catalogue en vigueur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Méthode de mesure Oscillométrique / Plage de mesure Pression:	Pression: 30-260 mmHg; pouls: 40~199 batt./minute
Précision	Pression: ± 3 mmHg Pouls: ± 5 % de la lecture
Capacité de stockage	7 mémoires
Arrêt automatique	5 minutes après la dernière pression de touche
Source d'alimentation	Bloc batterie et adaptateur secteur fournis
Dimensions	130 (L) X 133 (l) X 167,5 (H) mm
Poids	600 g (sans bloc batterie)
Taille des brassards	S : 16~26 cm / M : 24~36 cm / L : 34~46 cm
Conforme aux normes	EN 1060-3+A2 : 2010 / EN 1060-4: 2004

Accessoires

Trolley pour AC1000f

Pour une utilisation nomade :

- Fixation du tensiomètre sécurisée par 2 vis
- Grande maniabilité grâce aux 5 roulettes (2 avec frein)
- Mat réglable en hauteur
- Support pour adaptateur secteur
- Panier de transport des accessoires



Brassard pour CH155f et MJ701f



Brassard L
(34 ~ 46 cm)

Outils d'aide à la vente



Aperçu avec produit



Aperçu avec produit

Présentoir tensiomètre poignet

Présentoir tensiomètre brassard

Modèle	Référence	Code ACL
Tensiomètre poignet BK150	CC 583 7300	34010 602 541 7 9
Tensiomètre brassard CH155f	CC 582 7300	34010 602 541 9 3
Tensiomètre brassard MJ701f	CC 582 7400	34010 602 542 2 3
Tensiomètre brassard professionnel AC1000f	CC 582 8100	34010 602 702 9 2
Brassard L (34 ~ 46 cm) pour CH155f et MJ701f	CC 582 7600	34010 602 702 7 8
Trolley pour AC1000f	CC 582 8200	34010 602 702 8 5
Présentoir tensiomètre poignet	CC 583 7400	
Présentoir tensiomètre brassard	CC 582 7500	

Photos non contractuelles. Des composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

C 110 11 16 1

DUPONT MEDICAL *by drive*

Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie
ZAC du Ban la Dame - BP 19 - 54390 FROUARD (France)
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496